

STATIS 1:5 L

- **Service Manual**




SciCan
A HIGHER STANDARD


Contenu / Contents

Outils / Tools	3
Démontage / Dismounting STATIS 1:5L	4
7.1 Bouton-poussoir / Push button	5
7.2 Rotor	5
7.3 Diffuseur / Diffuser	5
Montage / Mounting STATIS 1:5L	6
1.1 Rotor	6
2.1 Bouton-poussoir / Push button	6
4.1 Diffuseur / Diffus	6
Exploded View	8


Outils / Tools

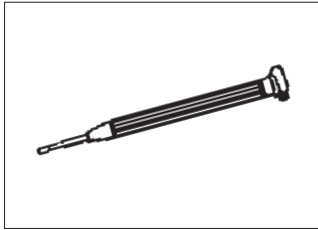


REF 007.63.33
Tournevis D 1.8 x 0.45
Screwdriver D 1.8 x 0.45

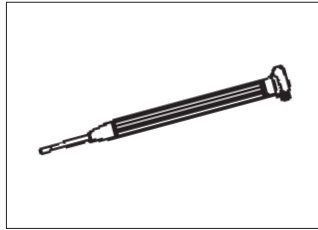

REF 007.63.35
Tournevis D 1.5
Screwdriver D 1.5

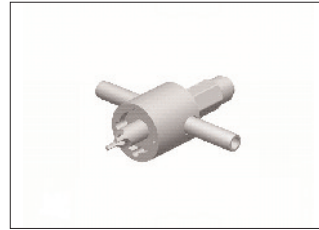


REF 107.60.01
Clé diffuseur spray
Spray diffuser key

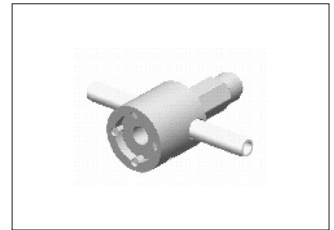

REF 107.60.04
Clé pour couvercle
Key cap



REF 107.70.02
Rack de contrôle
Control Rack

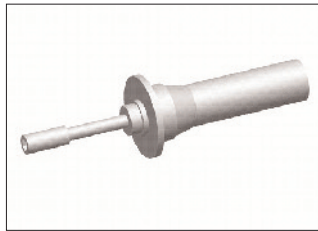

REF 930.02.05
Tournevis dynamométrique
Torque screwdriver



REF 1200056 / 920.01.23
Colle LOCTITE 222 50 ml
Glue LOCTITE 222 50 ml




REF 1200057
Colle LOCTITE 241 50 ml
Glue LOCTITE 241 50 ml




REF 1200205
Colle LOCTITE 272 50 ml
Glue LOCTITE 272 50 ml



1.1

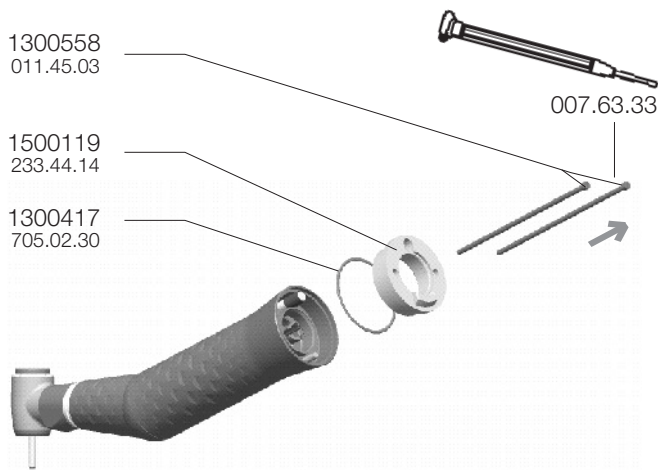

2.1

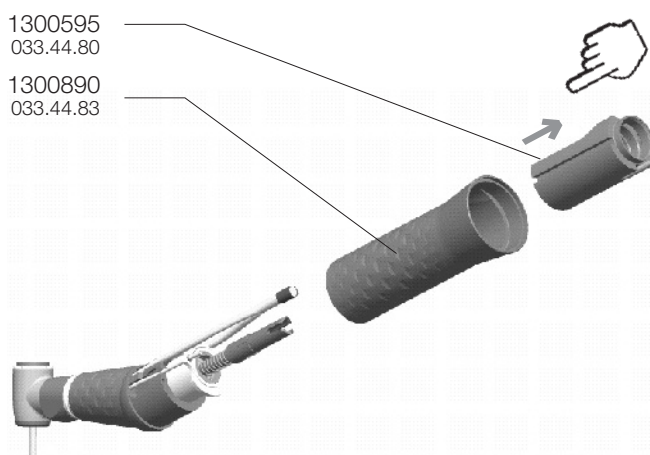

3.1

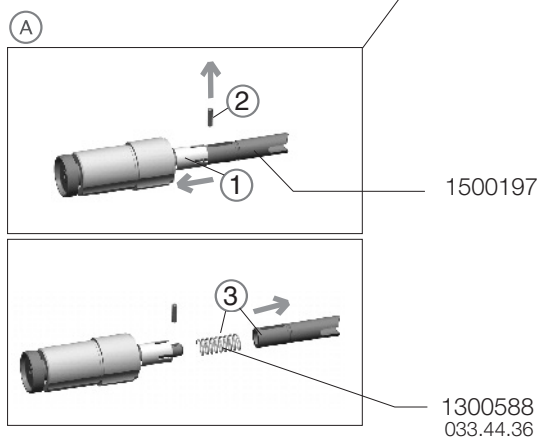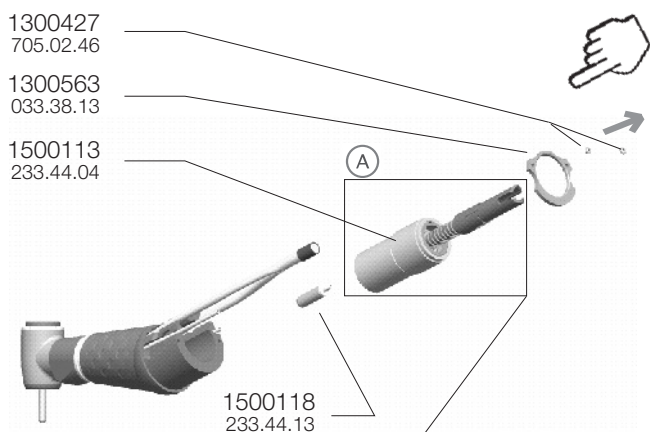


Avant le démontage

Nettoyer, stériliser ou désinfecter le dispositif et faire un constat général d'aspect et de fonctionnement. Veuillez vous référer à l'éclaté correspondant au dispositif pour la visualisation des références.


Before dismounting

Clean, sterilise or disinfect the instrument and check for satisfactory general appearance and operation. Please refer to the exploded drawing of the instrument for the reference codes.


4.1

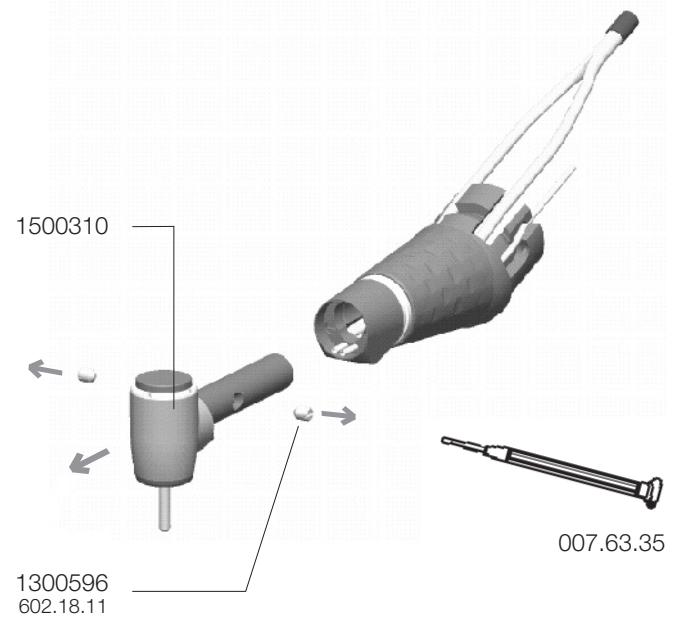

5.1

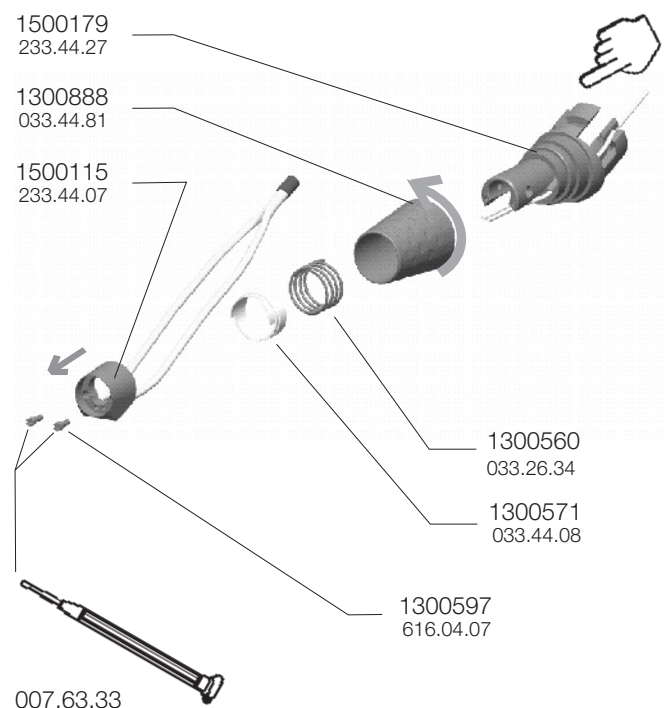


6.1

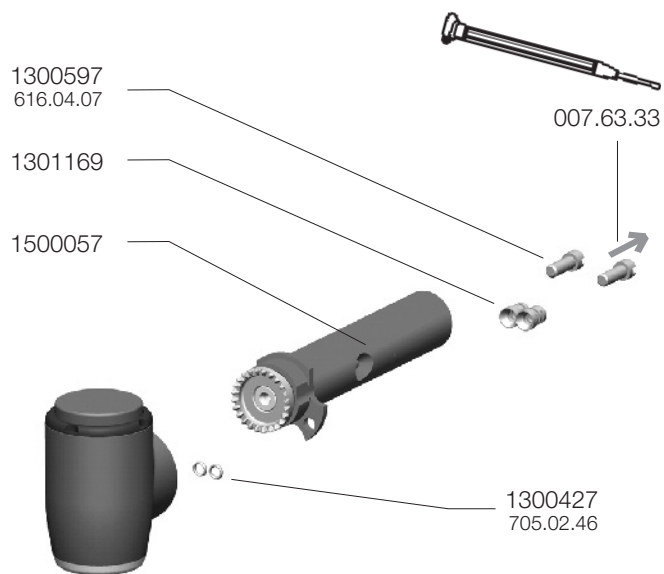


7.1 Bouton-poussoir / Push button

REF 1500121

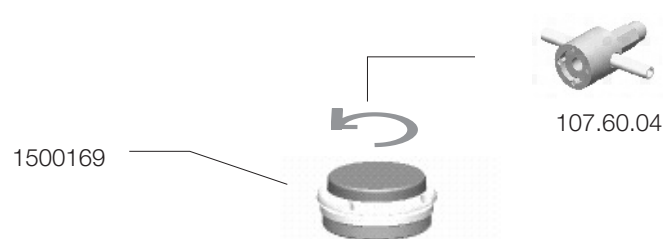


7.2 Rotor

REF 1500219

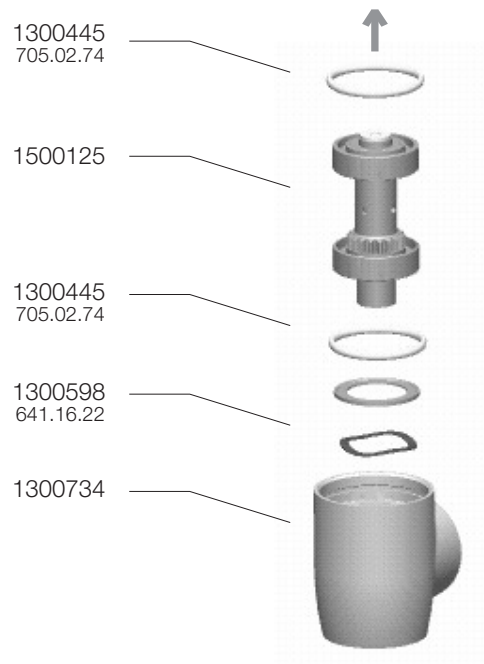

7.3 Diffuseur / Diffuser

REF 1300562



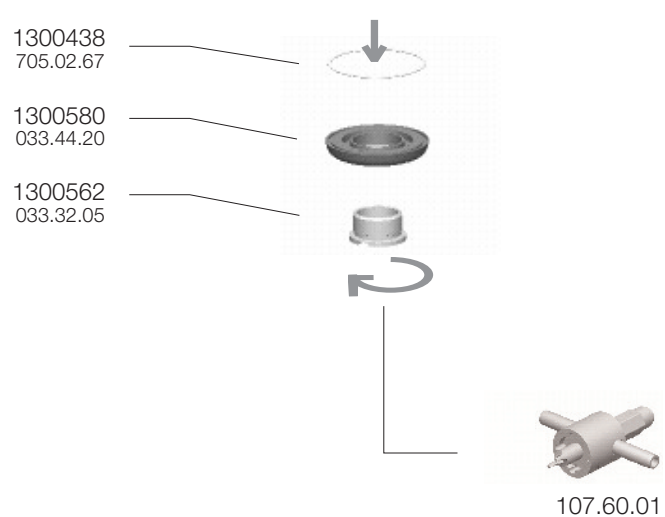


Avant le montage


N'utiliser que des pièces d'origine SciCan. Le montage de pièces d'origine différente peut altérer le fonctionnement de la turbine. Avant de remonter, nettoyer et vérifier l'état général de toutes les pièces démontées et les changer si nécessaire. Tous les o-ring et rondelles en matière synthétique doivent être changés. Les pièces à coller et à étancher doivent être exemptes de graisse.

Before dismounting


Use original SciCan parts only. The use of parts from other suppliers may interfere with correct turbine operation. Before remounting, clean and check the general state of all the dismounted parts and replace them, if necessary. All synthetic material O-rings and washers must be changed. The parts to be glued and sealed must be grease free.

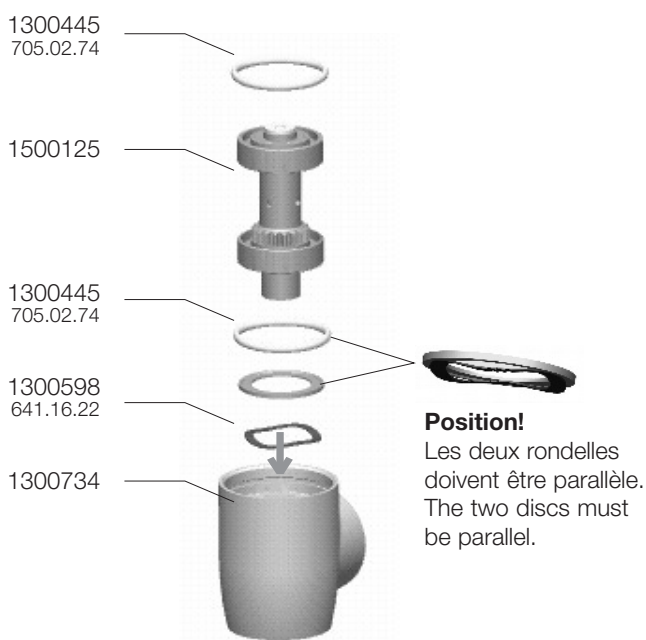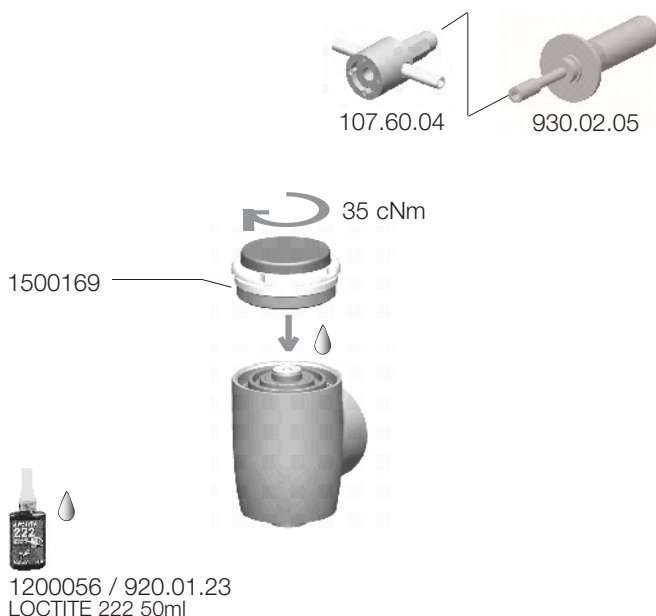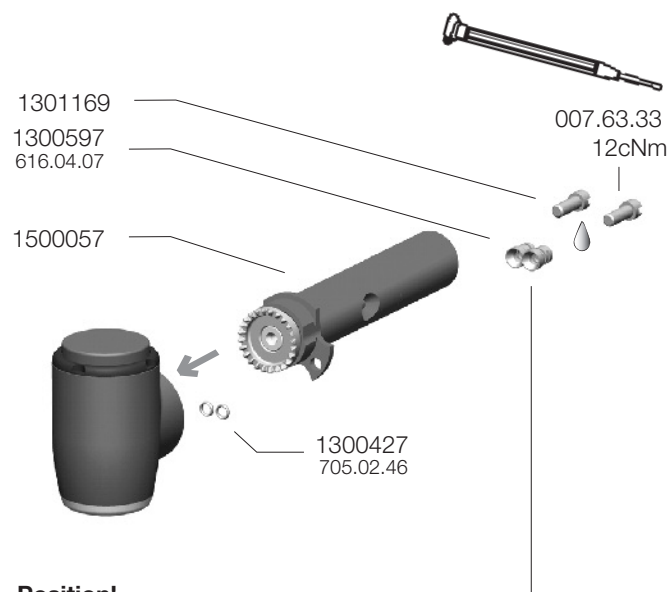1.1 Rotor**REF 1500219****2.1 Bouton-poussoir / Push button****REF 1500132****3.1****Position!**


Les deux plats en face l'un de l'autre.
Flat side opposite one to the other.

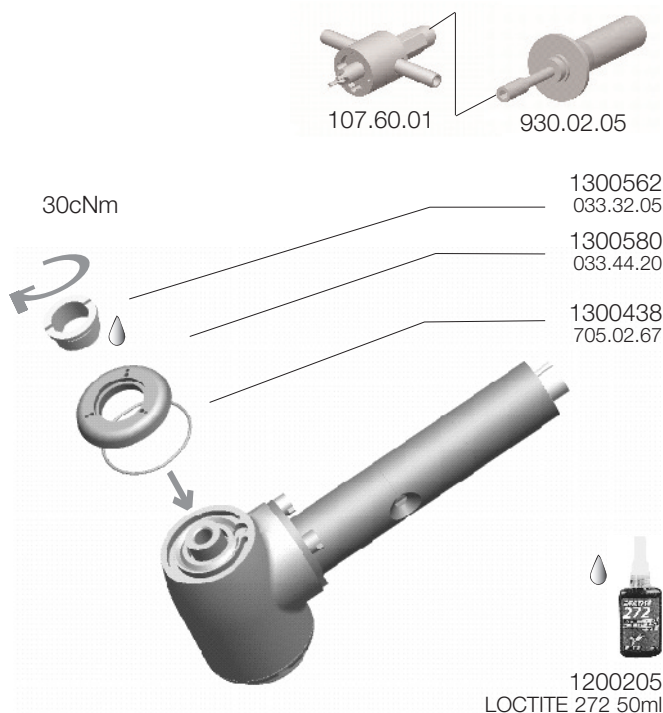**4.1 Diffuseur / Diffuser****REF 1300660**


5.1

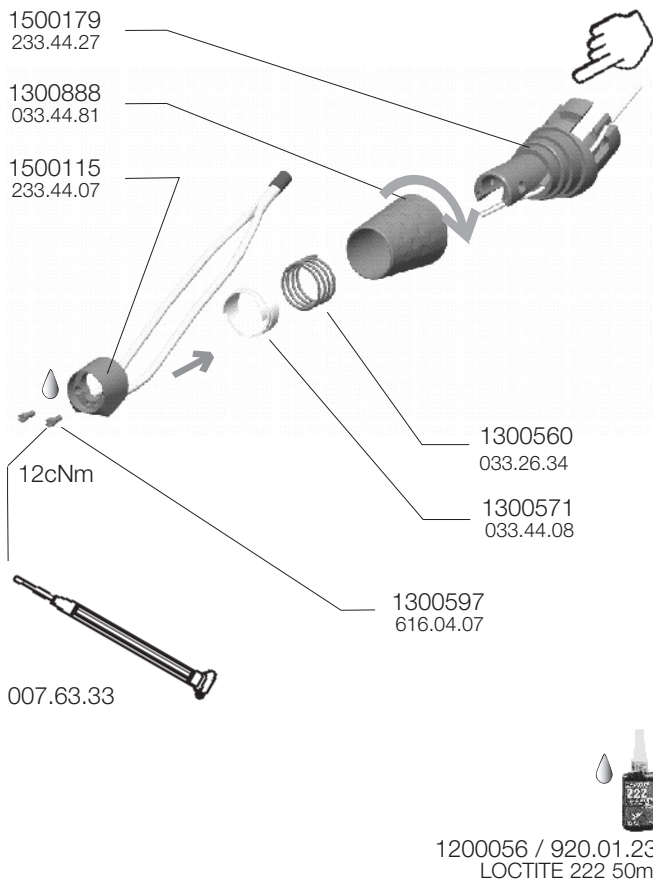


6.1

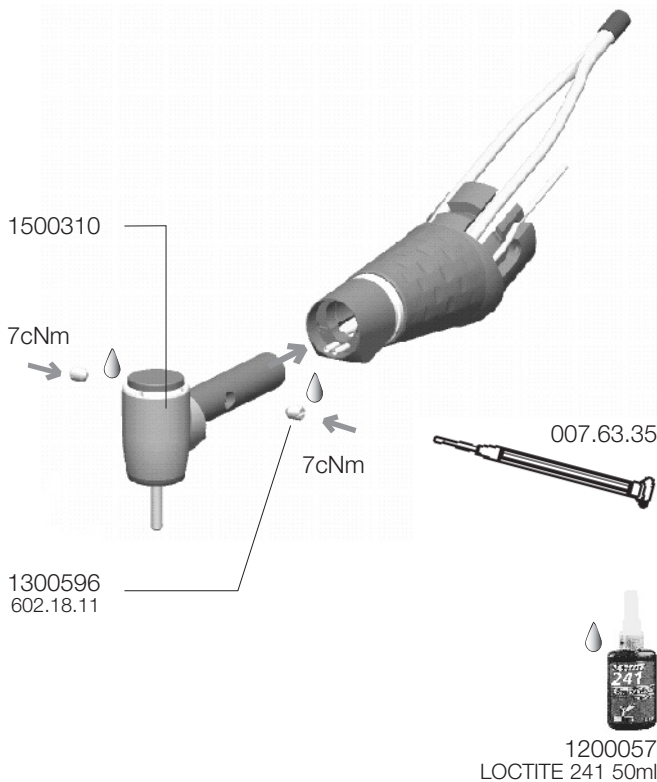

7.1

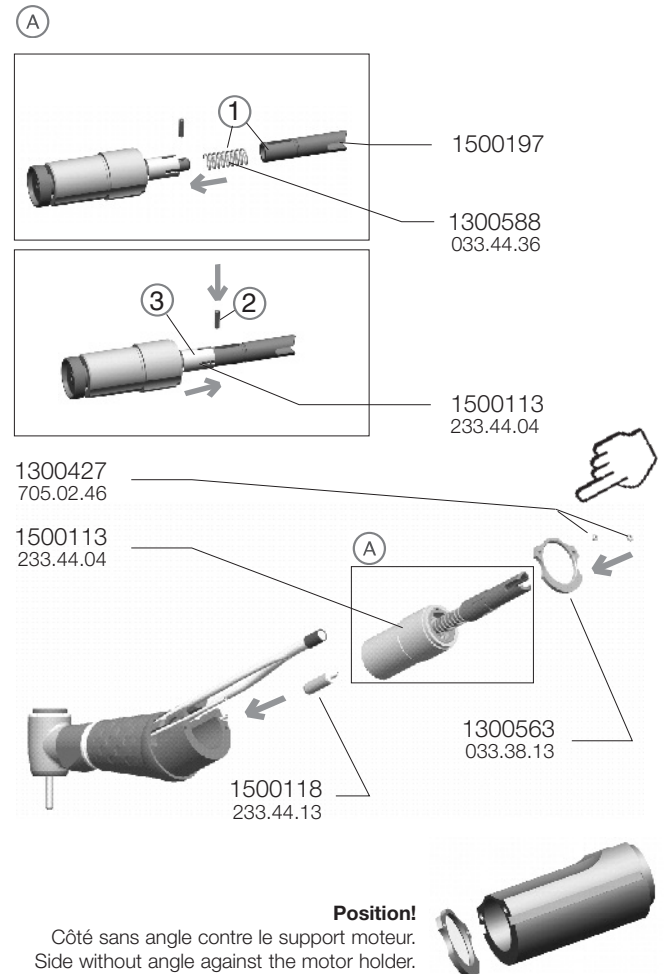

8.1

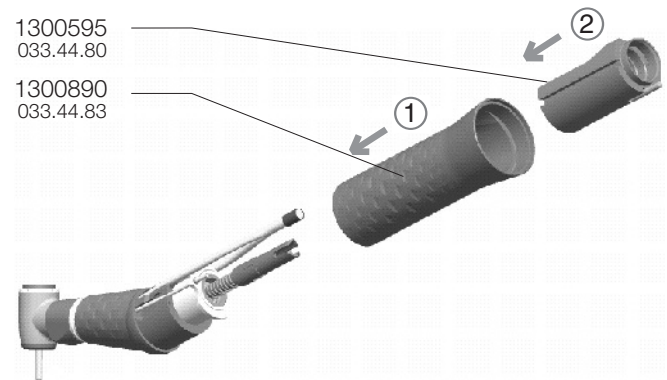

9.1

